




# **Irrigador Oral** Clearpik Portable

Você está pronto para uma saúde bucal melhor e um sorriso mais saudável?  
Com a combinação de pressão d'água e pulsos, o Irrigador Oral Clearpik Multilaser remove as bactérias nocivas que ficam profundamente entre os dentes e sob a linha da gengiva onde a escovação simplesmente não alcança.


### **LIMPEZA TRADICIONAL**

O uso de fio dental tem acesso limitado a escovação tradicional não alcança sob a linha da gengiva facilmente restos de comida e bactérias nocivas.

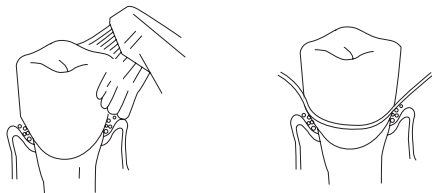

### **LIMPEZA DO IRRIGADOR ORAL**

Remove restos de comida e bactérias nocivas com pulsos de água de alta frequência.

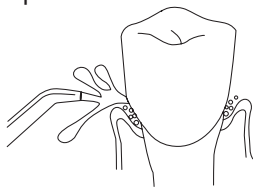

## CUIDADOS IMPORTANTES

Quando usar equipamentos eletrônicos, especialmente quando houver crianças presentes, sempre siga as precauções de segurança abaixo.

### **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.**

#### **AVISO!**

Para reduzir o risco de queimaduras, choques elétricos, incêndio e ferimentos graves:

- Não manuseie o carregador com mãos molhadas.
- Não coloque o aparelho dentro d'água.
- Não use no banho.
- Não coloque o produto em um local onde ele possa cair ou ser empurrada em uma banheira, box de chuveiro ou pia.
- Não apanhe o produto que caiu em água, desligue-o da tomada imediatamente
- Verifique se há dano no cabo de alimentação antes de usar pela primeira vez e durante o tempo de uso do produto.
- Não ligue este dispositivo em um sistema de tensão diferente do especificado no dispositivo ou carregador.
- Não use este produto se ele estiver com o cabo ou tomada danificados e se não funcionar devidamente. Bem como se tiver sofrido uma queda ou dano ou se caiu em líquido. Entre em contato com a Multilaser, ou seu distribuidor local.
- Não direcione o jato d'água sob a língua, dentro do ouvido, nariz ou outras áreas delicadas. Este produto é capaz de produzir pressão que pode causar dano sério nestas áreas. Consulte "Instruções de Uso" para mais informação no uso correto
- Use este produto apenas como indicado nestas

instruções e de acordo com as indicações de seu profissional de saúde bucal.

- Use este produto apenas como indicado nestas instruções e de acordo com as indicações de seu profissional de saúde bucal.
- Preencha o reservatório com água ou uma solução (apenas soluções recomendadas).
- Não deixe cair ou insira nenhum objeto estranho em qualquer orifício do aparelho.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.
- Não opere o aparelho onde se estiver usando oxigênio e aerossóis.
- Não use enxaguantes bucais que contenham iodo, água sanitária ou óleo de melaleuca.
- Não ligue o produto enquanto usa piercings na boca.
- Remova antes de ligar.
- Não use se tiver um ferimento aberto na boca ou língua.
- Se seu médico ou cardiologista prescrever medicação antibiótico antes de procedimentos dentais, você deve consultar seu dentista antes de usar este aparelho ou qualquer higienizador.
- Para uso doméstico apenas. Não use fora de casa.
- Instrua cuidadosamente e supervisione crianças e pessoas com necessidades especiais no uso correto deste produto.
- Crianças devem ser supervisionadas para que se certifiquem de que não brinquem com o aparelho.

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.**

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO E ACESSÓRIOS



**AVISO: TODOS OS BICOS NÃO ESTÃO INCLUSOS EM TODOS MODELOS.**

Substitua a cada 3 meses		Substitua a cada 6 meses	
<b>Bico ortodôntico</b> 	<b>IDEAL PARA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aparelhos ortodônticos</li> <li>✓ Uso geral</li> </ul>	<b>Bico clássico</b> 	<b>IDEAL PARA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uso geral</li> </ul>
<b>Bico periodontal</b> 	<b>IDEAL PARA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bolsas Periodontais</li> <li>✓ Furcações</li> </ul>	<b>Limpador de língua</b> 	<b>IDEAL PARA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hálito mais fresco</li> </ul>
<b>Bico removedor de placas</b> 	<b>IDEAL PARA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implantes</li> <li>✓ Coroas</li> <li>✓ Captadores</li> <li>✓ Pontes</li> <li>✓ Uso geral</li> </ul>		

## ESPECIFICAÇÕES

Dimensões: 8 x 6,6 x 22,7 cm

Peso Líquido: 240g

Voltagem: 100 – 240 V (Bivolt)

Potência: 9-18W

Reservatório: 200ml

Conteúdo da Embalagem: 1 irrigador oral portátil, 2 bicos clássicos com caixa higiênica, 1 manual de instruções, 1 cabo de alimentação

**IMPORTANTE:** Esse irrigador oral foi projetado para uso pessoal e doméstico não devendo ser usado para acompanhamento médico.

## PROCEDIMENTOS DE USO

- A unidade contém uma bateria de lítio. Na extremidade, o botão é usado para fazer o ciclo entre os diversos modos: Modo padrão - modo suave - massagem - desligado.
- Ele se desligará automaticamente se pressionar o botão por mais de 1 segundo.
- Se um modo ficar ativo por mais de 120 segundos, o aparelho se desligará automaticamente.
- Quando estiver carregando, e as três luzes piscarem sequencialmente, a unidade estará carregada.
- O aparelho não deve ser usado enquanto carrega.
- Para melhor resultado, mantenha o aparelho de pé.
- Direcione o jato, girando o botão no topo do cabo.



## INÍCIO

Importante! Mantenha o aparelho desligado e carregue-o por 24 horas na energia elétrica, para que esteja completamente carregado. Ligue o cabo de alimentação em qualquer tomada. Não use o aparelho até a carga completa.




## INSERINDO E REMOVENDO BICOS

Insira o bico no centro do botão na parte superior do cabo. O anel colorido deve ser encaixado na extremidade do botão se o bico estiver travado corretamente.


Como visto na figura abaixo, com o reservatório d'água para cima, abra a tampa e preencha com água.

Para remover o bico do cabo, pressione o botão de desprendimento do bico e puxe o bico do cabo.

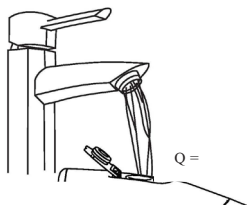

## TÉCNICA RECOMENDADA



Curve-se com proximidade de uma pia e coloque o bico na boca. Mire o bico na direção do dente. Ligue o aparelho.

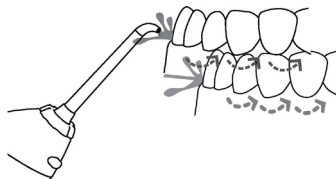

Direcione o jato em um ângulo de 90 graus em sua linha da gengiva.




Feche levemente os lábios para evitar o retorno d'água, mas permitindo que ela caia na pia. Para melhores resultados, inicie pelos molares (dentes traseiros) e vá até os dentes da frente. Passe o jato pela linha da gengiva e pare brevemente entre os dentes. Continue o processo até que todas as áreas em volta e entre os dentes estejam limpas.

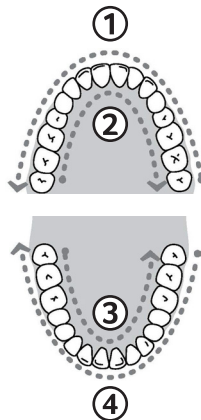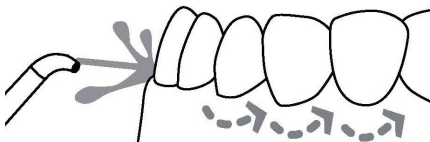



## MODO DE DESMONTAGEM

Quando terminar  
Desligue a unidade.  
Esvazie qualquer  
líquido remanescente  
no reservatório.  
De acordo com a  
figura 1, segure a  
unidade levemente  
com o dedo indicador  
e puxe para baixo,  
enquanto isso, gire no  
sentido anti-horário  
como visto na seta.

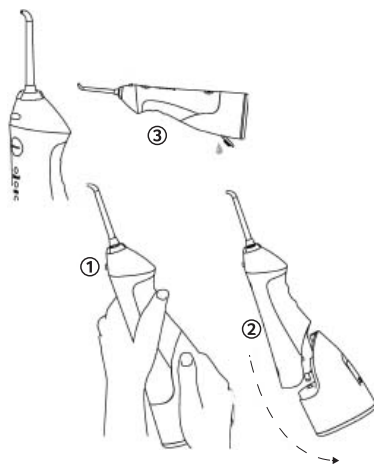

## PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES

Problema	Causa	Solução
Vazamento entre os bicos e o cabo	Anel de vedação danificado na base fixa; base fixa não está travada	Entre em contato com o vendedor para fazer a manutenção
A entrada da bomba está vazando	Anel de vedação danificado ou há impurezas na entrada	Entre em contato com o vendedor para fazer a manutenção
Vazamento do reservatório	Funcionamento em Baixa voltagem	Substitua o anel de vedação, entre em contato com o vendedor para fazer a manutenção
Pressão inadequada	Funcionamento em Baixa voltagem	Use após carga completa
O equipamento não liga	Funcionamento em Baixa voltagem	Entre em contato com o vendedor para fazer a manutenção
O equipamento não tem fluxo de água na saída	Funcionamento em Baixa voltagem	Substitua o anel de vedação, entre em contato com o vendedor para fazer a manutenção



## LIMPEZA

Após o uso de qualquer solução especial no reservatório, enxágue-o bem. Preencha parcialmente o reservatório com água morna, mire o jato na pia, ligue a unidade e deixe-o funcionar até que se esvazie o reservatório. Isso impedirá que o bico se entupa e ajudará a sua unidade a durar mais tempo. Limpe o produto quando necessário, usando um pano macio e um produto de limpeza suave e não-abrasivo. Antes da limpeza, desligue o aparelho da tomada. Antes de expor o jato dental a temperaturas congelantes, remova o reservatório e ligue o jato até que esteja completamente vazio.

## MANUTENÇÃO

### Descarte da Bateria

Antes de ligar pela primeira vez o dispositivo, carregue-o por 24 horas na energia elétrica, para que esteja completamente carregado. Para carregar seu Irrigador Oral, insira o cabo de alimentação em qualquer tomada elétrica padrão. Se o Irrigador Oral for ser guardado por um período longo de tempo, faça uma carga de 24 horas antes de guardar. Para maximizar a vida útil das baterias, o carregador deve ser mantido continuamente conectado à unidade, com a exceção de quando o aparelho estiver sendo usado.

### Manutenção da Bateria

A unidade contém uma bateria de lítio. Ao final da vida útil da bateria, recicle a unidade em um centro de reciclagem de aparelhos eletrônicos local de acordo com as exigências estaduais vigentes. A bateria não é substituível.



## TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº \_\_\_\_\_ Data da Compra  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

# MULTILASER



**Alô Alô**  
tem alguém aí?

**11 3198.0004**

Queremos muito ouvir você!

SAC (cobertura para todo o Brasil)

Acompanhe a gente!  
[www.multilaser.com.br](http://www.multilaser.com.br)